


Posey Fallskyddsmattor

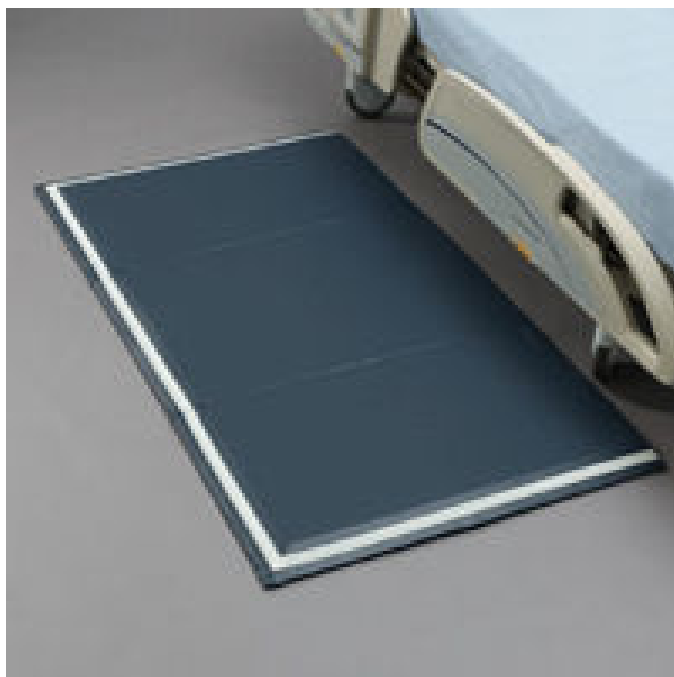

Båda mattorna kan torkas av med de flesta förekommande rengöringsmedlen. För desinfektion kan sprit användas.

Fasad fallskyddsmatta med efterlysande rand

Den nya fallskyddsmattan med efterlysande kant är tillverkad i EVA-skum (Etylenvinylacetat) för en hög stötabsorption. Mattan läggs bredvid sängen och kan absorbera upp till 85 % av stötkraften vid fall ur sängen. Ytan av vinyl är lätt att torka av och mattan har en antihalkbotten för att ligga still på golvet.

Tjockleken är 2,5 cm och de fasade kanterna är förbättrade så att rollator eller rullstol enkelt ska kunna rullas upp till sängkanten och för att minimera snubbelrisken. Mattan är vikbar i tre delar.

Med sina efterlysande kanter syns mattan bra i mörkret vilket underlättar för personal att orientera sig när man t.ex. inte vill störa den sovande med att tända lampan. Kanterna lyser 30 – 40 minuter efter att lampan släckts.

Art.Nr: 6027R (97 x 178cm) CE-märkt.

Fasad fallskyddsmatta

Posey fallskyddsmatta i EVA-skum (Etylenvinylacetat) har en hög stötabsorption. Mattan läggs bredvid sängen och kan absorbera upp till 85 % av stötkraften vid fall ur sängen. Sömmarna i mattan är förbättrade för att förhindra vätska att komma in i mattan. Den är lätt att torka av och har en antihalkbotten. Tjockleken är 2,5 cm och de fasade kanterna är utformade så att rollator eller rullstol enkelt ska kunna rullas upp till sängkanten och för att minimera snubbelrisken. Mattan är vikbar i tre delar.

Art.Nr: 6027 (97 x 178cm) CE-märkt.



Almedo AB

Björkvägen 10
182 46 Enebyberg

Tel. 08 – 758 25 70
Fax. 08 – 758 11 25

info@almedo.se
www.almedo.se